

АСПИРАЦИОННЫЕ
И ДРЕНАЖНЫЕ
СИСТЕМЫ

Plasti-med
"supporting healthy life"

ИСТОРИЯ

Компания «Plasti-med» основана в 1995 году. Основной продукцией компании являются медицинские товары однократного использования, основные группы товаров представляют собой одноразовые изделия для анестезии, дренирования, урологии, гинекологии и терапии. Компания «Plasti-med» является одним из крупнейших производителей медицинских изделий однократного использования в Турции. В то же время компания экспортирует свою продукцию более чем в 80 стран мира.

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

Наша цель заключается в том, чтобы непрерывно поставлять высококачественные медицинские изделия медицинским работникам по всему миру и гарантировать, что эти изделия полностью соответствуют требованиям как международных, так и национальных нормативных документов, а также требованиям покупателей. Все наши изделия изготовлены в соответствии с Директивой Совета 93/42/ЕЕС.

ПРОДУКЦИЯ

На протяжении 15 лет доля на рынке продукции компании «Plasti-med», профессионала в сфере анестезии, постоянно увеличивалась. Благодаря большому опыту в проектировании, разработке и производстве медицинских изделий премиум-класса ассортимент продукции продолжает расти. Вся продукция, поставляемая компанией «Plasti-med», проходит строгий контроль качества, чтобы обеспечить полное соответствие требованиям покупателей. Компания «Plasti-med» серьезно занимается научно-исследовательскими разработками новой продукции, дополняющими текущий широкий ассортимент, чтобы оставаться на передовых позициях в разработке технологических новинок. Наш отдел по обслуживанию клиентов всегда готов поделиться подробными сведениями о любом изделии, свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию.

СТАНДАРТЫ

С момента своего создания компания «Plasti-med» осуществляет производство, руководствуясь соответствующими стандартами. Производство продукции осуществляется в соответствии с Директивой о медицинских изделиях 93/42/ЕЕС (2007/47/ЕС) и правилами Надлежащей производственной практики. Система качества сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003, вся продукция имеет сертификацию ЕС.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Основой кадровой политики компании «Plasti-med» является сотрудничество с опытным и высоко квалифицированным персоналом для обеспечения понимания целей качества и обслуживания.

СТРАНИЦА	РАЗДЕЛ
4	Характеристики систем с вакуумным мешком
6	Вакуумные мешки
7	Контейнеры
8	Мобильные стойки
12	Комплектующие
14	Наконечник Янкауэра
15	Аспирационный набор Янкауэра
16	Набор для дренирования ран

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ С ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ

- Вакуумный мешок защищает от возможных инфекций, вызываемых больничной средой.
- Прост и удобен в применении медицинским персоналом.
- Прост в соединении и сборке.
- При заполнении легко может быть заменен.
- Устраняет риск разбрызгивания и проливания.
- Помогает поддерживать больничную гигиену.
- Упрощает утилизацию контролируемых медицинских отходов.
- Благодаря закрытой системе запах не распространяется по помещению.
- Во время операции может использоваться как анестезиологической, так и операционной бригадами.
- В целом, может использоваться для схожих процедур аспирации жидкости, применяющих источник вакуума.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНОГО МЕШКА

- Отсутствует контакт с пациентом.
- В качестве сырья для мешка и крышки используется прочный пластик.
- Можно заказать мешки разного объема: 1200, 1500, 2000, 3000 мл.
- Мешки гибкие и имеют плоское основание.
- Вакуумная часть порта пациента снабжена антирефлюксным клапаном, предотвращающим обратный поток.
- Также в ней имеется фильтр, препятствующий передаче бактерий и вирусов и останавливающий аспирацию при заполнении вакуумного мешка.
- Система крышек позволяет закрыть все порты по окончании процесса аспирации.
- Вакуумный мешок снабжен вакуумной трубкой, длиной 1,8 м, для осуществления аспирации из тела пациента.
- Также имеются два обычных коннектора и один коннектор Карпон для обеспечения соединения пациента с мешком.
- Вакуумный мешок имеет большой порт для образцов, который может пропускать твердые частицы, такие как образцы костей и тканей, получаемые при артроскопии, эндоскопии и прочих аналогичных процедурах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Гелеобразователь: обеспечивает затвердевание жидкости, находящейся внутри вакуумного мешка.
- Антивспениватель: предотвращает образование пены из аспирированной жидкости.
- Дезинфектант: обеспечивает дезинфекцию аспирированной жидкости.


Добавки не являются обязательными.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРА

- Имеется три типа контейнеров, объемом 1500 мл, 2000 мл и 3000 мл.
- Контейнер выполнен из ударопрочного поликарбоната.
- Способен выдерживать автоклавную обработку до 121 °С.
- На контейнере имеется двухпозиционный вакуумный клапан для быстрого соединения с вакуумным мешком.
- Легко может быть адаптирован для подключения к системе центрального вакуума или переносному вакуумному устройству.
- Может крепиться на стене или стойке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕДИНЕНИЯ


- Может соединяться с системой мобильной стойки, а также соединяться с 1х2 и 2х2 контейнерами в операционной.
- Соединение выполнено таким образом, что одновременно может использоваться не менее 2 контейнеров на мобильной стойке.
- В двойной системе 1 контейнер может использоваться операционной бригадой, а другой контейнер — анестезиологической бригадой.
- Во время параллельного соединения 4 контейнеров все контейнеры являются активными.
- Контейнеры могут быть соединены последовательно.
- В реанимационных палатах и во время реанимационных процедур система может крепиться к стене или на другую систему.
- Во время использования систем мобильных стоек соединение между центральной вакуумной системой и контейнером осуществляется посредством трубок длиной 2,5–4 м. В особых случаях решение предоставляется по запросу.
- В случае настенного монтажа используются трубки длиной 1–1,8 м.

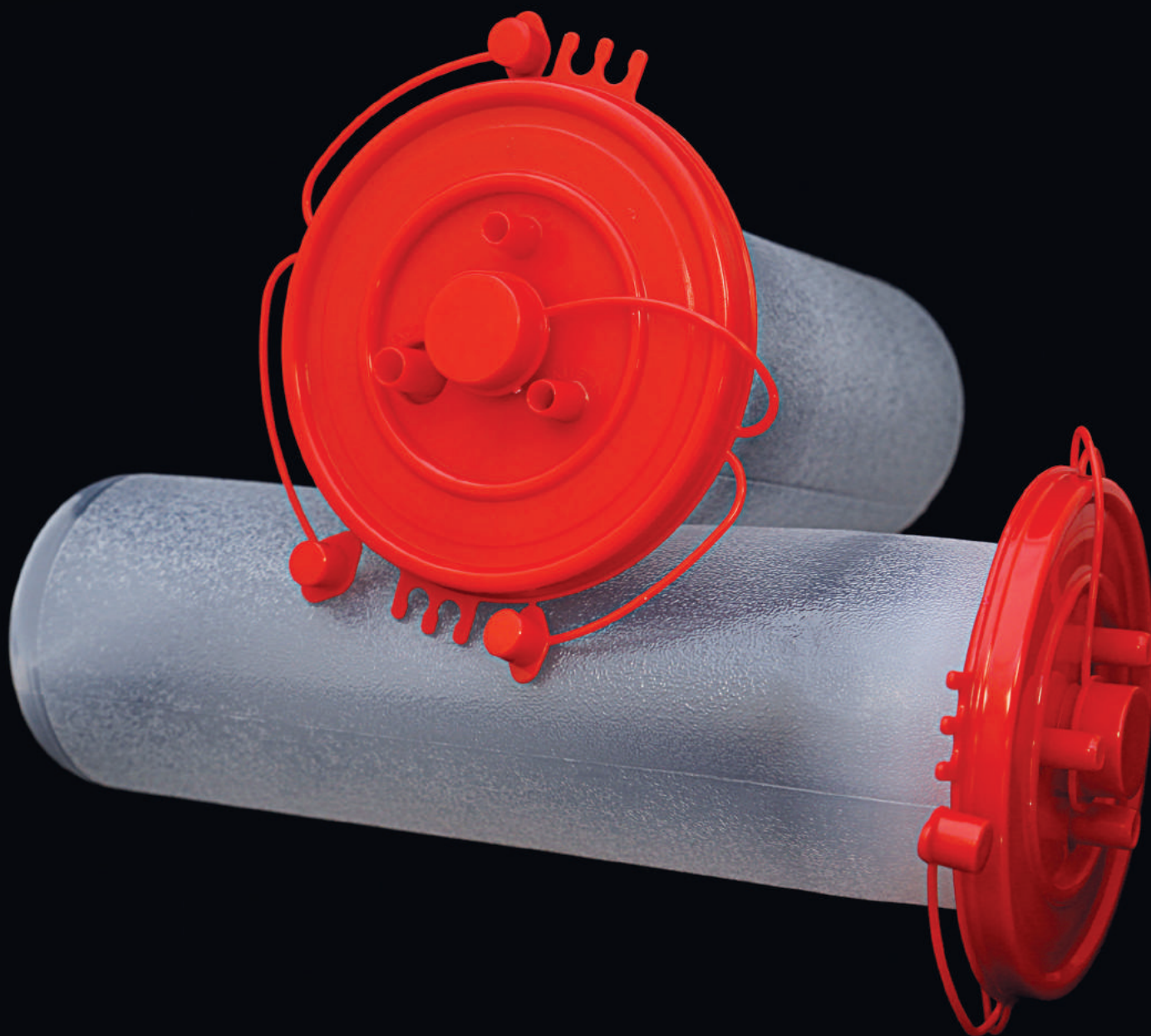


КОД	ОПИСАНИЕ
160 202	ВАКУУМНЫЙ МЕШОК 1500 мл
160 203	ВАКУУМНЫЙ МЕШОК 2000 мл
160 201	ВАКУУМНЫЙ МЕШОК 3000 мл




Прикроватный блок пациента

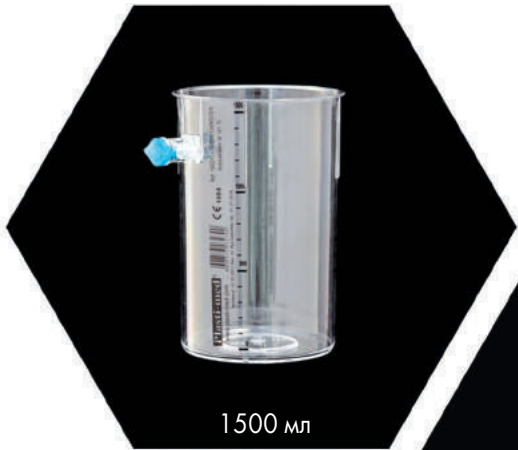

1500 мл

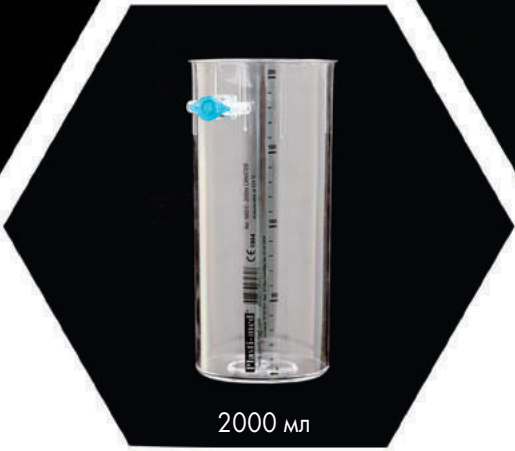

2000 мл

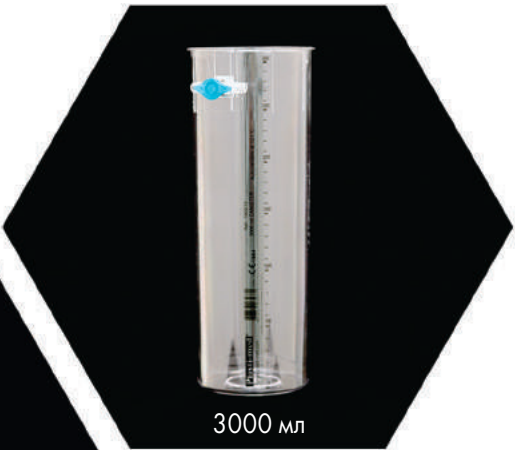

3000 мл


КОД	ОПИСАНИЕ
160 211	ВАКУУМНЫЙ КОНТЕЙНЕР 1500 мл
160 212	ВАКУУМНЫЙ КОНТЕЙНЕР 2000 мл
160 213	ВАКУУМНЫЙ КОНТЕЙНЕР 3000 мл



КОД	ОПИСАНИЕ
160 233	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 1500 мл
160 234	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 1500 мл
160 235	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 2000 мл
160 236	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 2000 мл
160 231	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 3000 мл
160 232	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 3000 мл

- Подходящий вакуумный мешок помещают в контейнер. Вакуумная трубка вставляется в запорный двухпозиционный клапан на контейнере. Другая часть вакуумной трубки вставляется в вакуумный порт на крышке.
- Тандемный порт и выходное отверстие порта пациента на вакуумном мешке соединяются друг с другом с помощью трубки для тандемного соединения.
- Трубка пациента длиной 1,8 и (или) 3,7 м вставляется в выходное отверстие порта пациента на вакуумном мешке.
- Трубки, выходящие из вакуумного распределителя, другим концом вставляются в запорный двухпозиционный клапан на контейнере.
- Центральная трубка вставляется во внешнюю соединительную часть вакуумного распределителя, и система готова к использованию.

Схема последовательного (тандемного) соединения (2 контейнера)

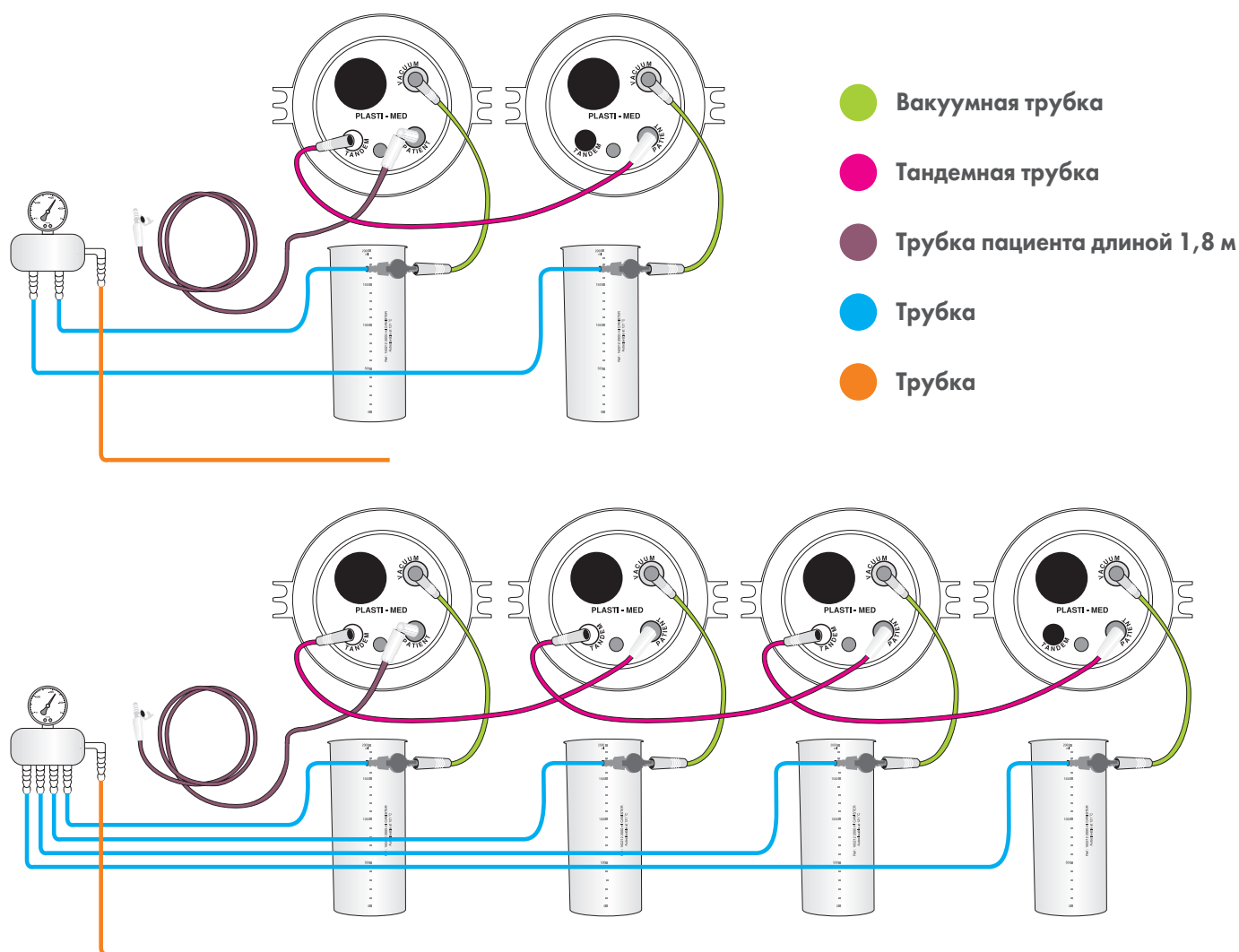






АСПИРАЦИОННЫЕ НАБОРЫ

Комплекующие



№ п/п	КОД	ОПИСАНИЕ
1	160 213 09	ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО С КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, 46 мм
2	160 213 01 1	ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО С КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, 32 мм
3	160 271	АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУБЦИНА
4	160 322	ТРУБКА ВАКУУМНОГО МЕШКА ДЛИНОЙ 1,8 м С КОННЕКТОРОМ КАРКОН
5	160 221	ФИЛЬТР АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
6	160 221-B	ФИЛЬТР АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
7	160 404	КОННЕКТОР КАРКОН
8	160 210 01	САШЕ С РАСТВОРИМЫМ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИМ ПОРОШКОМ, 15 г

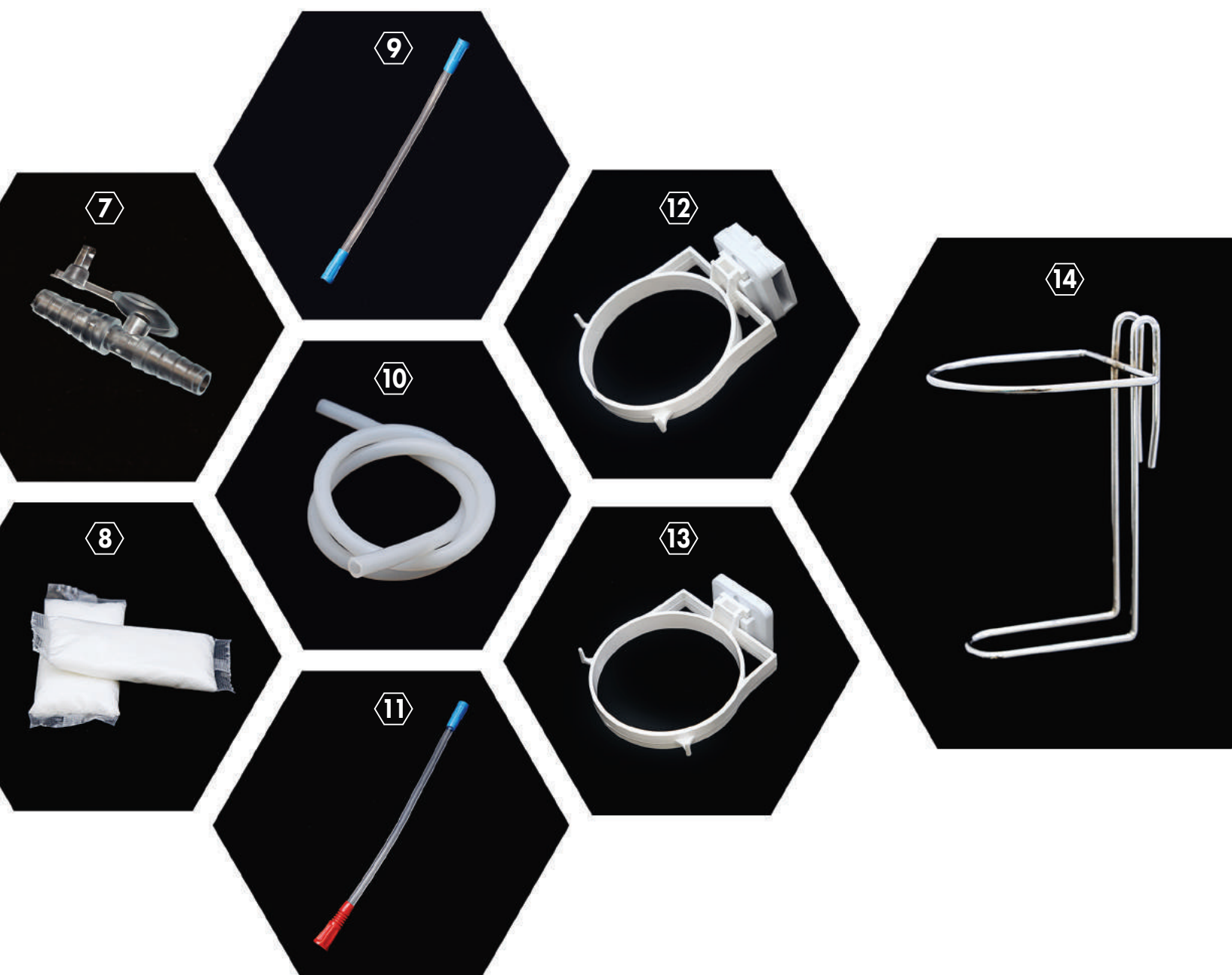

№ п/п	КОД	ОПИСАНИЕ
9	160 231 05	ТРУБКА ДЛЯ ТАНДЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ
10	A AST 036 2	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ВАКУУМНОГО МЕШКА (8 x 13 мм)
11	160 231 02	ВАКУУМНАЯ ТРУБКА
12	160 213 04	ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО С КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
13	160 213 02	ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО С КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ
14	160 261	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ, 3000 мл
14	160 263	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ, 1500 мл
14	160 265	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ, 2000 мл

АСПИРАЦИОННЫЕ НАБОРЫ

Аспирационный наконечник (рукоятка) Янкауэра _____


Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



Аспирационный наконечник Янкауэра	Со стандартным концом	С закругленным концом	С узким концом	Цельный	Вакуум-контроль
160 153	✓			✓	✓
160 163	✓			✓	
160 154		✓		✓	✓
160 164		✓		✓	
160 173			✓	✓	✓
160 174			✓	✓	


АСПИРАЦИОННЫЕ НАБОРЫ

Аспирационный набор Янкауэра

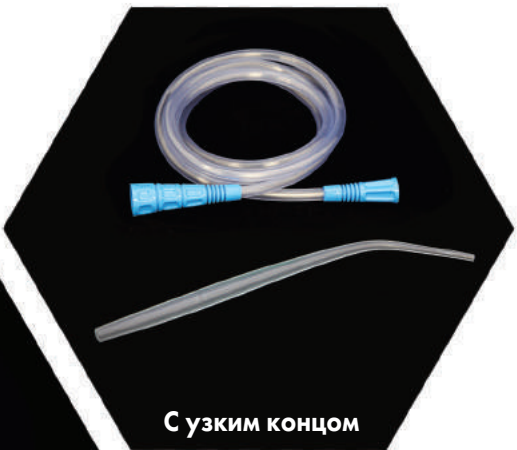

Аспирационный набор Янкауэра	Со стандартным концом	С закругленным концом	С узким концом	Цельный	Вакуум-контроль
160 101	✓				✓
160 111	✓				
160 102		✓			✓
160 112		✓			
160 151	✓			✓	✓
160 161	✓			✓	
160 152		✓			✓
160 162		✓			
160 172			✓	✓	✓
160 171			✓	✓	



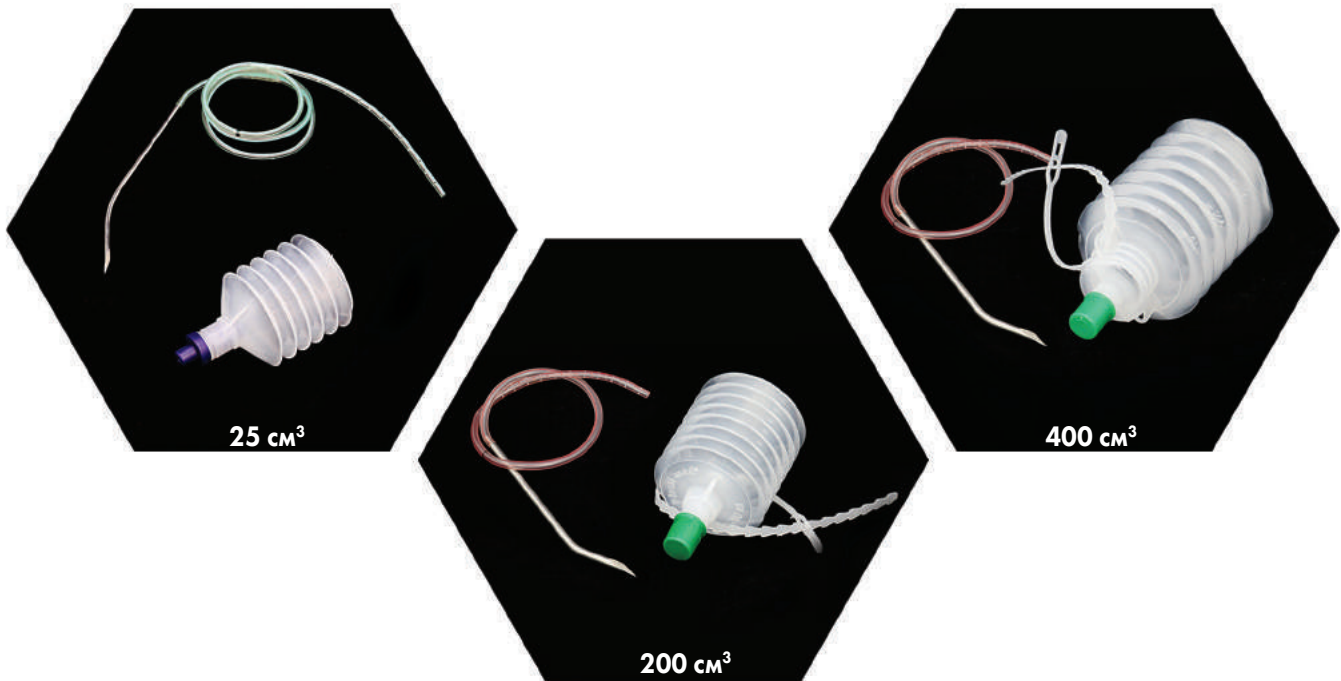

Мини, 25 см³	6 ch	8 ch	10 ch
Одинарный троакар	103 406	103 408	103 410

200 см³	8 ch	10 ch	12 ch	14 ch	16 ch	18 ch
Одинарный троакар	103 208	103 210	103 212	103 214	103 216	103 218
Двойной троакар	103 308	103 310	103 312	103 314	103 316	103 318

400 см³	8 ch	10 ch	12 ch	14 ch	16 ch	18 ch
Одинарный троакар	103 008	103 010	103 012	103 014	103 016	103 018
Двойной троакар	103 108	103 110	103 112	103 114	103 116	103 118



КОД	ОПИСАНИЕ
103 701	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, СИЛИКОНОВЫЙ, 200 см ³
103 704	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, ПВХ, 200 см ³
103 703	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, СИЛИКОНОВЫЙ, 400 см ³
103 702	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, ПВХ, 400 см ³

КОД	ОПИСАНИЕ
103 507	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, СИЛИКОНОВЫЙ, 200 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 7 мм
103 510	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, СИЛИКОНОВЫЙ, 200 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 10 мм
103 513	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, СИЛИКОНОВЫЙ, 200 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 13 мм
103 657	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, ПВХ, 200 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 7 мм
103 660	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, ПВХ, 200 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 10 мм
103 673	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, ПВХ, 200 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 13 мм

КОД	ОПИСАНИЕ
103 527	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, СИЛИКОНОВЫЙ, 400 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 7 мм
103 530	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, СИЛИКОНОВЫЙ, 400 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 10 мм
103 533	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, СИЛИКОНОВЫЙ, 400 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 13 мм
103 607	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, ПВХ, 400 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 7 мм
103 610	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, ПВХ, 400 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 10 мм
103 613	НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН, ПВХ, 400 см ³ — ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР 13 мм




**СИЛИКОНОВЫЙ КРУГЛЫЙ
ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР**

КОД	ТИП
103 715	15 ch
103 718	18 ch
103 721	21 ch
103 722	22 ch
103 724	24 ch
103 727	27 ch
103 730	30 ch

**ПЛОСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ
КАТЕТЕР (СИЛИКОН)**

КОД	ТИП
103 705	5 ch
103 707	7 ch
103 710	10 ch
103 713	13 ch



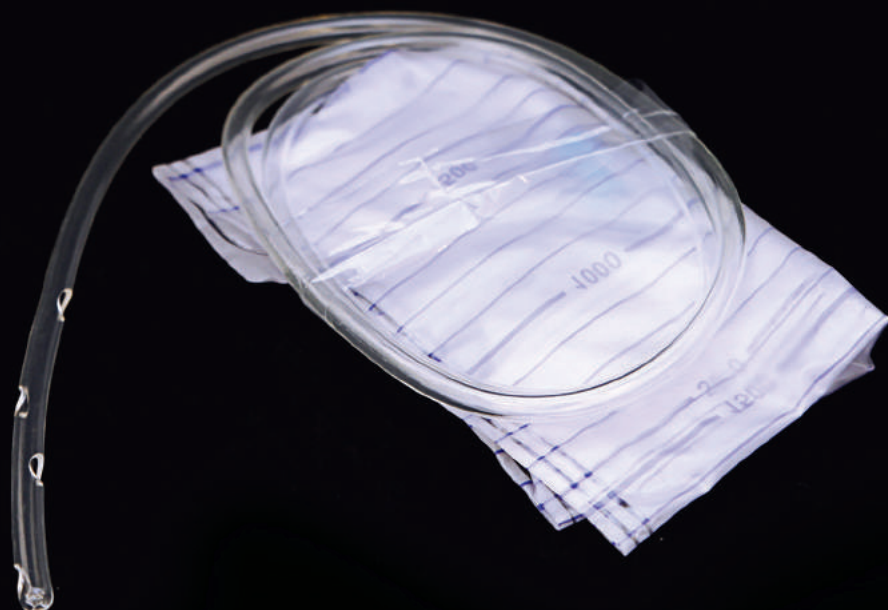

ПВХ

МЯГКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР С ДРЕНАЖНЫМ МЕШКОМ

КОД	ТИП
101 010	10 ch
101 012	12 ch
101 014	14 ch
101 015	15 ch
101 016	16 ch
101 018	18 ch
101 020	20 ch
101 021	21 ch
101 022	22 ch
101 024	24 ch
101 026	26 ch
101 027	27 ch
101 028	28 ch
101 030	30 ch

СИЛИКОН

МЯГКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР С ДРЕНАЖНЫМ МЕШКОМ

КОД	ТИП
103 812	12 ch
103 814	14 ch
103 815	15 ch
103 816	16 ch
103 818	18 ch
103 820	20 ch
103 821	21 ch
103 822	22 ch
103 824	24 ch
103 826	26 ch
103 827	27 ch
103 828	28 ch
103 830	30 ch



**С 2019 ГОДА МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС НА НАШЕЙ НОВОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ.**





с 1995 года

**Plasti-med Plastik Medikal Ürünler
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Дери Осб Махаллеси, Ян Санайи Джад., № 13, Тузла/Стамбул, Турция
Тел.: +90 (216) 591 04 91 **Факс:** +90 (216) 591 04 90

info@plasti-med.com
www.plasti-med.com

АСПИРАЦИОННЫЕ
И ДРЕНАЖНЫЕ
СИСТЕМЫ

Plasti-med
"supporting healthy life"

