



торгово-производственная фирма

ПОЛЮС



КАТАЛОГ

Самый актуальный и востребованный
ассортимент рентгенозащитной одежды

РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Рентгенозащитная одежда предназначена для защиты медицинского персонала и пациентов от ионизирующего излучения до 150 кВ во время медицинского рентгенологического исследования и лечения.

01.

**Рентгенозащитная
одежда для медицин-
ского персонала**

Фартуки
Халат
Жилет
Юбка
Воротник
Шапочка
Рукавицы

02.

**Рентгенозащитная
одежда для пациентов**

Фартуки
Юбка
Воротник
Накидка (перелина)
Передник

03.

**Рентгенозащитная
одежда для детей**

Фартуки
Юбка
Передник
Воротник
Накидка (перелина)
Набор для микропедиатрии

04.

**Пластины
рентгенозащитные**

Пластина прямоугольная
Набор пластин 4 шт.
Набор пластин 7 шт.



Изделия изготавливаются из прорезиненной ткани с добавлением свинца, эквивалентному значениям 0,25; 0,35 и 0,5 Pb.



Для защиты от механических воздействий внешняя и внутренняя поверхность изделий выполнена из плотной, водоотталкивающей ткани 2 типов: Vinyl или высокотехнологичная курточная ткань.



Для фиксации используются застёжки «липучка» и/или ременная тесьма с застёжкой «фастекс», есть изделия без элементов фиксации. Края изделий обработаны окантовочной тесьмой жёлтого цвета.

РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ МЕД. ПЕРСОНАЛА

ФАРТУК РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ

- Фартук рентгенозащитный односторонний легкий Полюс ФРЗО-Л Рb 0,25

✦ Наиболее востребованная модель фартука, поскольку в ассортименте данной модели присутствуют фартуки с разной степенью защиты, а при совместном применении фартука с воротником обеспечивается полная защита передней части тела персонала.



01. «Застёжка – липучка»

02. Материал (ткань или винил)




Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ФРЗО-Л	0.25	SM	42-44 р.	2,95	3,17
		MM	46-54 р.	2,95	3,17
		LM	56-60 р.	3,5	3,76

ФАРТУК РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ

- Фартук рентгенозащитный односторонний тяжелый Полюс ФР30-Т Pb 0,35
- Фартук рентгенозащитный односторонний тяжелый Полюс ФР30-Т Pb 0,5

✦ За счёт широких перекрещивающихся деталей на спинке вес фартука равномерно распределяется и обеспечивает комфортное прилегание на разный тип фигуры.

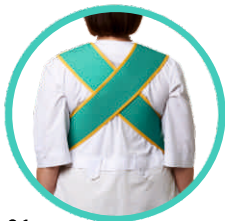

01. Комфортное прилегание на спинке



02. Материал (ткань или винил)

Наименование	Эквивалент, Pb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ФР30-Т	0.35	SM	42-44 р.	3,8	4,02
		MM	46-54 р.	3,8	4,02
		LM	56-60 р.	4,5	4,77
ФР30-Т	0.5	SM	42-44 р.	5,07	5,29
		MM	46-54 р.	5,07	5,29
		LM	56-60 р.	6,01	6,27

ФАРТУК РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ

- Фартук рентгенозащитный односторонний со стойкой легкий Полюс ФРЗОст-Л Рb 0,25

✦ Применяется персоналом в стоматологической практике. Комфортную носку и плотное прилегание фартука на широкий размерный ряд обеспечивают ременные ленты, фиксирующиеся на поясе с помощью лёгкой и долговечной застёжки «фастекс».



01. Плотное прилегание по спинке за счёт ременных лент с застёжкой «фастекс»

02. Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ФРЗОст-Л	0.25	SM	42-44 р.	2,88	3,1
		MM	46-54 р.	2,88	3,1
		LM	56-60 р.	3,5	3,76

ФАРТУК РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ

- Фартук рентгенозащитный двухсторонний легкий
Полюс ФРЗД-Л Pb 0,35 (лицевая сторона) + 0,25 (спина)
- Фартук рентгенозащитный двухсторонний тяжелый
Полюс ФРЗД-Т Pb 0,5 (лицевая сторона) + 0,25 (спина)

✦ Модель фартука предназначена для защиты тела персонала с обеих сторон. Фиксация происходит при помощи застёжек «липучка», находящаяся сбоку. Также при помощи ременной ленты на поясе регулируется прилегание фартука под разный размер.

✦ Для полной защиты врача фартук применяется совместно с воротником и шапочкой.



01. ●
Защита тела с двух сторон

02. ●
«Застёжка-липучка»

03. ●
Ремённая лента на поясе
с застёжкой «фастекс»

04. ●
Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Pb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ФРЗД-Л	0.35+0.25	SM	42-44 р.	4,96	5,27
		MM	46-54 р.	4,96	5,27
		LM	56-60 р.	5,8	6,17
ФРЗД-Т	0.5+0.25	SM	42-44 р.	6,24	6,55
		MM	46-54 р.	6,24	6,55
		LM	56-60 р.	7,31	7,67

ХАЛАТ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ

- Халат рентгенозащитный легкий Полюс ХРЗ-Л Pb 0,35 (лицевая сторона) + 0,25 (спина)
- Халат рентгенозащитный тяжелый Полюс ХРЗ-Т Pb 0,5 (лицевая сторона) + 0,25 (спина)

- ✦ Применяется для наиболее полной защиты тела персонала со всех сторон во время проведения операций под рентгеновским контролем. Полная защита плечевого пояса обеспечивается короткими рукавами. Фиксация и прилегание на разный тип фигуры обеспечивается комфортной застёжкой «липучка».
- ✦ Для оптимальной защиты с халатом необходимо использовать воротник и шапочку.



01. ●
«Застёжка – липучка»

02. ●
Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Pb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ХРЗ-Л	0.35+0.25	SM	42-44 р.	6,82	7,25
		MM	46-54 р.	7,64	8,12
		LM	56-60 р.	8,06	8,57
ХРЗ-Т	0.5+0.25	SM	42-44 р.	8,52	8,95
		MM	46-54 р.	9,53	10,01
		LM	56-60 р.	10,06	10,57

ЖИЛЕТ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ

- Жилет рентгенозащитный легкий Полюс ЖРЗ-Л Рb 0,35 (лицевая сторона) + 0,25 (спина)
- Жилет рентгенозащитный тяжелый Полюс ЖРЗ-Т Рb 0,5 (лицевая сторона) + 0,25 (спина)

- ✦ Жилет рентгенозащитный применяется во время проведения операций под рентгеновским контролем. Часто жилет используют совместно с юбкой, воротником и шапочкой.
- ✦ Благодаря совместному применению с юбкой, обеспечивается полная защита верхней и нижней части тела, комфорт в движении и равномерное распределение нагрузки на плечи и бедра.



01. ●
«Застёжка – липучка»
02. ●
Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ЖРЗ-Л	0.35+0.25	SM	42-44 р.	3,1	3,29
		MM	46-54 р.	3,52	3,74
		LM	56-60 р.	3,87	4,11
ЖРЗ-Т	0.5+0.25	SM	42-44 р.	3,95	4,14
		MM	46-54 р.	4,49	4,71
		LM	56-60 р.	4,95	5,19

ЮБКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ

- Юбка рентгенозащитная легкая Полюс ЮРЗ-Л Рb 0,35
- Юбка рентгенозащитная тяжелая Полюс ЮРЗ-Т Рb 0,5



- ✦ Обеспечивает эффективную защиту со всех сторон в области гонад и костей таза персонала. Чаще применяется совместно с жилетом для более полной защиты тела и равномерного распределения нагрузки, что позволяет обеспечить более комфортное передвижение.
- ✦ Благодаря широкой ленте липучке юбка застёгивается на запах и обеспечивает максимальную защиту костей таза и область гонад пациента и персонала.



В таблице представлены технические характеристики рентгенозащитных юбок для медицинского персонала:



Наименование	Эквивалент, Pb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ЮРЗ-Л	0.35	MS (длина 50 см.)	46-52 р.	3,68	3,88
		MM (длина 60 см.)	46-52 р.	4,43	4,68
		MV (длина 40 см.)	46-52 р.	3,0	3,28
		ML (длина 70 см.)	46-52 р.	5,7	6,3
		LS (длина 50 см.)	54-60 р.	4,34	4,58
		LM (длина 60 см.)	54-60 р.	5,38	5,67
ЮРЗ-Т	0.5	MS (длина 50 см.)	46-52 р.	5,18	5,39
		MM (длина 60 см.)	46-52 р.	6,25	6,49
		MV (длина 40 см.)	46-52 р.	4,12	4,39
		ML (длина 70 см.)	46-52 р.	8,82	9,41
		LS (длина 50 см.)	54-60 р.	6,11	6,35
		LM (длина 60 см.)	54-60 р.	7,58	7,87

ВОРОТНИК РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ

- **Воротник рентгенозащитный легкий Полюс ВРЗ-Л Рb 0,35**
- **Воротник рентгенозащитный тяжелый Полюс ВРЗ-Т Рb 0,5**

- ✦ Воротник рентгенозащитный предназначен для защиты щитовидной железы и области шеи персонала.
- ✦ Прилегание можно регулировать специальными застежками-липучками.



01.
«Застёжка – липучка»

02.
Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Вес изделия, кг.	
			ткань	винил
ВРЗ-Л	0.35	Б/Р	0,38	0,40
ВРЗ-Т	0.5	Б/Р	0,53	0,55

ШАПОЧКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ

- Шапочка рентгенозащитная легкая Полюс ШРЗ-Л Рb 0,25
- Шапочка рентгенозащитная тяжелая Полюс ШРЗ-Т Рb 0,35

✦ Применяется для защиты головы медицинского персонала при исследованиях, связанных с большими радиационными нагрузками. Шапочка фиксируется под разный размер головы при помощи застёжки «липучка», которая располагается на затылочной области.



01. ●
«Застёжка – липучка»
02. ●
Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ШРЗ-Л	0.25	55-64 р.	55-64 р.	0,38	0,41
ШРЗ-Т	0.35	55-64 р.	55-64 р.	0,52	0,55

РУКАВИЦЫ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ

• Рукавицы рентгенозащитные Полюс РР3 Рb 0,35

- ✦ Применяется для защиты рук персонала в ветеринарных клиниках.
- ✦ Конструкция рукавиц полностью защищает кисти рук от рентгеновского излучения, с тыльной стороны при этом оставляя пальцы свободными.



01. Пальцы остаются свободными

02. Материал (ткань или винил)




Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Вес изделия, кг.	
			ткань	винил
РР3	0.35	Б/Р	1,23	1,29

РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ФАРТУКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ

- **Фартук стоматологический рентгенозащитный односторонний легкий**
Полюс ФРЗС-Л Рb 0,25
- **Фартук стоматологический рентгенозащитный односторонний тяжелый**
Полюс ФРЗС-Т Рb 0,35

- ✦ Применяется для защиты передней части тела пациента при дентальных исследованиях или исследованиях черепа. Передняя панель фартука, длиной 75 см позволяет защитить кости таза и область гонад пациента, а стойка - область шеи.
- ✦ Внутренняя сторона воротника-стойки и задние панели фартука фиксируются на спине при помощи застёжки «липучка».

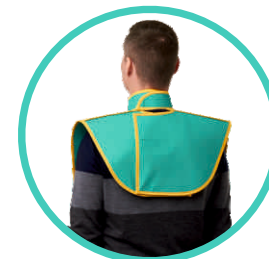

01. ●
Фиксируются на спине при помощи застёжки "липучка»

02. ●
Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ФРЗС-Л	0.25	ММ	46-54 р.	2,78	2,99
ФРЗС-Т	0.35	ММ	46-54 р.	3,82	4,03

ФАРТУКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ

- **Фартук стоматологический рентгенозащитный для ортопантомографии**
Полус Pb 0,35

- ✦ Обеспечивает защиту тела пациента спереди и сзади вдоль позвоночника при ортопантомографии. Передняя панель фартука, длиной 75 см, шириной 55 см позволяет защитить кости таза и область гонад пациента. Передняя и задняя панели фартука фиксируются на плече при помощи «липучки».
- ✦ Фартук возможно использовать совместно с воротником для других дентальных исследований при исследовании черепа.



01. ●
Панели фартука фиксируются на плече при помощи «липучки»

02. ●
Материал (ткань или винил)




Наименование	Эквивалент, Pb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ФРЗСор	0.35	MM	46-54 р.	4,06	4,28

ЮБКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ

- Юбка рентгенозащитная легкая Полюс ЮРЗ-Л Рb 0,35
- Юбка рентгенозащитная тяжелая Полюс ЮРЗ-Т Рb 0,5



01.
Юбка сзади

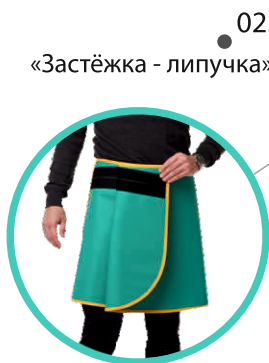

02.
«Застёжка - липучка»



03.
Юбка в развороте



04.
Материал (ткань или винил)



Благодаря широкой ленте липучке юбка застёгивается на запах и обеспечивает максимальную защиту костей таза и область гонад пациента и персонала.



Свинцовый эквивалент имеет одинаковое значение по всей поверхности юбки, таким образом спереди, на запахе юбки, значение свинцового эквивалента удваивается (0,7 Рb для юбки ЮРЗ-Л и 1,0 Рb для юбки ЮРЗ-Т)



В таблице представлены технические характеристики рентгенозащитных юбок для пациентов:



Наименование	Эквивалент, Pb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ЮРЗ-Л	0.35	MS (длина 50 см.)	46-52 р.	3,68	3,88
		MM (длина 60 см.)	46-52 р.	4,43	4,68
		MV (длина 40 см.)	46-52 р.	3,0	3,28
		ML (длина 70 см.)	46-52 р.	5,7	6,3
		LS (длина 50 см.)	54-60 р.	4,34	4,58
		LM (длина 60 см.)	54-60 р.	5,38	5,67
ЮРЗ-Т	0.5	MS (длина 50 см.)	46-52 р.	5,18	5,39
		MM (длина 60 см.)	46-52 р.	6,25	6,49
		MV (длина 40 см.)	46-52 р.	4,12	4,39
		ML (длина 70 см.)	46-52 р.	8,82	9,41
		LS (длина 50 см.)	54-60 р.	6,11	6,35
		LM (длина 60 см.)	54-60 р.	7,58	7,87

ВОРОТНИК РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ

- **Воротник рентгенозащитный легкий Полюс ВРЗ-Л Рb 0,35**
- **Воротник рентгенозащитный тяжелый Полюс ВРЗ-Т Рb 0,5**

- ✦ Воротник рентгенозащитный предназначен для защиты щитовидной железы и области шеи персонала.
- ✦ Прилегание можно регулировать специальными застежками-липучками.



01.
«Застёжка – липучка»

02.
Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Вес изделия, кг.	
			ткань	винил
ВРЗ-Л	0.35	Б/Р	0,38	0,40
ВРЗ-Т	0.5	Б/Р	0,53	0,55

НАКИДКА (ПЕЛЕРИНА) РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ

- Накидка (пелерина) рентгенозащитная Полюс НРЗ Рb 0,35



Защищает щитовидную железу, плечевой пояс и верхнюю часть грудной клетки пациента при стоматологических исследованиях.



- 01. «Застёжка – липучка»
- 02. Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Вес изделия, кг.	
			ткань	винил
НРЗ	0.35	Б/Р	1,89	1,99

ПЕРЕДНИК РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ

- **Передник рентгенозащитный легкий Полюс ПРЗ-Л Рb 0,35**
- **Передник рентгенозащитный тяжелый Полюс ПРЗ-Т Рb 0,5**



Применяется в рентгенологических исследованиях для защиты половых органов и костей таза пациента со стороны пучка излучения. Благодаря поясу с застежкой «фастекс» передник фиксируется на бёдрах человека любой комплекции.



01.
Пояс с застёжкой
«фастекс»

02.
Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ПРЗ-Л	0.35	A1	37x40	0,85	0,9
		A2	40x45	0,94	1
ПРЗ-Т	0.5	A1	37x40	1,2	1,24
		A2	40x45	1,33	1,38

РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ФАРТУКИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ДЕТСКИЕ

- **Фартук рентгенозащитный односторонний детский легкий**
Полус ФРЗд-Л Pb 0,35
- **Фартук рентгенозащитный односторонний детский тяжелый**
Полус ФРЗд-Т Pb 0,5

- ✦ Защищает тело ребёнка спереди, включая плечевой пояс, от области горла до голеней. Планки задней панели фартука фиксируются на спине при помощи застёжки «липучка».
- ✦ Изделие изготавливается без стойки, возможно, использование совместно с воротником рентгенозащитным детским.



- 01. Планки фиксируются на «зстежку-липучку»
- 02. Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Pb	Размер	Размер (длина x ширина), см	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ФРЗОд-Л	0.35	A1	70x40	1,84	1,94
ФРЗОд-Т	0.5	A1	70x40	2,59	2,69

ЮБКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ДЕТСКАЯ

- Юбка рентгенозащитная детская Полюс ЮРЗд Рb 0,35

✦ Всесторонняя защита области гонад и костей таза ребёнка. Юбка имеет длинную застёжку «липучку!», благодаря которой спереди юбки образуется запах и значение свинцового эквивалента удваивается до 0,7 Рb.



01. ●
«Застёжка-липучка»

02. ●
Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Рb	Рост ребёнка, см	Вес изделия, кг.	
			ткань	винил
ЮРЗд	0.35	120-134	2,17	2,29

ПЕРЕДНИК РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ ДЕТСКИЙ

- Передник рентгенозащитный детский легкий Полюс ПРЗд-Л Pb 0,35
- Передник рентгенозащитный детский тяжелый Полюс ПРЗд-Т Pb 0,5



Защищает половые органы и кости таза ребёнка со стороны пучка излучения. благодаря поясу с застёжкой «фастекс» передник регулируется под разный обхват талии ребёнка. Имеет 2 варианта защитного эквивалента и размера.



01.

Пояс с застёжкой «фастекс»

02.

Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Pb	Размер	Соответствие Российскому размеру	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
ПРЗд-Л	0.35	C1	20x25	0,28	0,3
		C2	30x30	0,47	0,5
ПРЗд-Т	0.5	C1	20x25	0,4	0,41
		C2	30x30	0,66	0,69

ВОРОТНИК РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ ДЕТСКИЙ

- **Воротник рентгенозащитный детский легкий Полюс ВРЗд-Л Рb 0,35**
- **Воротник рентгенозащитный детский тяжелый Полюс ВРЗд-Т Рb 0,5**



Применяется для защиты щитовидной железы и области шеи ребёнка. имеет два варианта свинцового эквивалента. Чаще используется в комплекте с фартуком рентгенозащитным.



01.  Воротник с фартуком

02.  Материал (ткань или винил)



Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Вес изделия, кг.	
			ткань	винил
ВРЗд-Л	0.35	Б/Р	0,33	0,35
ВРЗд-Т	0.5	Б/Р	0,47	0,48

НАКИДКА (ПЕЛЕРИНА) РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ

- Накидка (пелерина) рентгенозащитная детская Полус НРЗд Рb 0,5



Защищает грудную клетку ребёнка, область шеи и щитовидную железу при дентальных исследованиях . Имеет максимальную степень свинцового эквивалента.



01. ●
Воротник с фартуком

02. ●
Материал (ткань или винил)




Наименование	Эквивалент, Рb	Размер	Вес изделия, кг.	
			ткань	винил
НРЗд	0.35	Б/Р	1,79	1,86

НАБОР ДЛЯ МИКРОПЕДИАТРИИ

Набор для микропедиатрии Полюс Pb 0,5:

- Пеленка рентгенозащитная Полюс ПлРЗм Pb 0,5
- Подгузник рентгенозащитный Полюс ПгрРЗм Pb 0,5
- Воротник рентгенозащитная Полюс ВРЗм Pb 0,5
- Пластина рентгенозащитная овальная Полюс ПлРЗО Pb 0,5
- Пластина рентгенозащитная прямоугольная Полюс ПлРЗП Pb 0,5


- ✦ В набор входит 5 защитных элементов одежды, которые используют в зависимости от проводимого рентгенологического исследования и защищают части тела младенца за исключением частей, подвергающихся исследованию.
- ✦ Материал (ткань или винил).

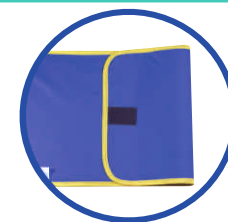


ПлРЗм



ПгрРЗм

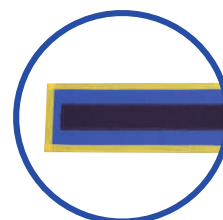

ПРЗП

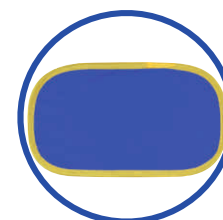

ПРЗО



ВРЗм

Наименование		Эквивалент, Pb	Размер, см	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
Пеленка рентгенозащитная	ПлРЗм	0.5	70x30	1,46	1,52
Подгузник рентгенозащитный	ПгрРЗм	0.5	Б/Р	0,66	0,69
Воротник рентгенозащитный	ВРЗм	0.5	Б/Р	0,27	0,28
Пластина рентгенозащитная овальная	ПРЗО	0.5	30x17,5	0,33	0,35
Пластина рентгенозащитная	ПРЗП	0.5	30x10,5	0,2	0,21

ПЛАСТИНЫ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ


- Пластина рентгенозащитная прямоугольная Полюс ПРЗП Рb 0,5
- Пластина рентгенозащитная прямоугольная Полюс ПРЗП Рb 0,5 - 4 шт

✦ Изделие индивидуальной защиты определенных частей тела пациента от нежелательного воздействия излучения во время диагностических или лечебных процедур.

✦ ПРЗП Рb 0.5 - 4 шт. Все пластины рентгенозащитные имеют одинаковую величину 35x10 см. С помощью ленты «Велькро» они соединяются между собой, защищая отдельные участки тела и внутренние органы пациента, оставляя исследуемый участок свободным.



ПРЗП

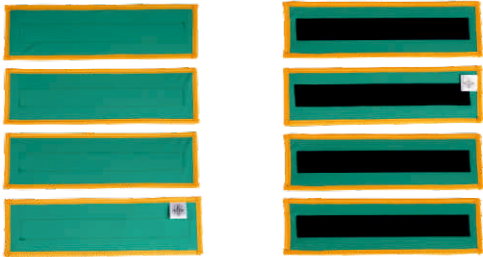

ПРЗП (4 шт.)

Наименование		Эквивалент, Рb	Размер (Длина x Ширина), см.	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
Пластина прямоугольная	ПРЗП	0.5	100x60	5,1	5,3
Пластина прямоугольная (4 шт.)	ПРЗП (4 шт.)	0.5	35x10	0,3	0,31


ПЛАСТИНЫ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ

Набор пластин рентгенозащитных (большой 7 шт) Pb 0,5

- Пластина рентгенозащитная прямоугольная Полюс ПРЗП Pb 0,5 - 2 шт
- Пластина рентгенозащитная квадратная Полюс ПРЗК Pb 0,5 - 2 шт
- Пластина рентгенозащитная овальная Полюс ПРЗО Pb 0,5 - 1 шт
- Пластина рентгенозащитная треугольная Полюс ПРЗТ Pb 0,5 - 1 шт
- Пластина рентгенозащитная дуговая Полюс ПРЗД Pb 0,5 - 1 шт



В комплект входят 7 элементов различного размера и формы, которые обеспечивают рентгенозащиту разных органов в зависимости от вида обследования при рентгенографии, урографии и ангиографии.

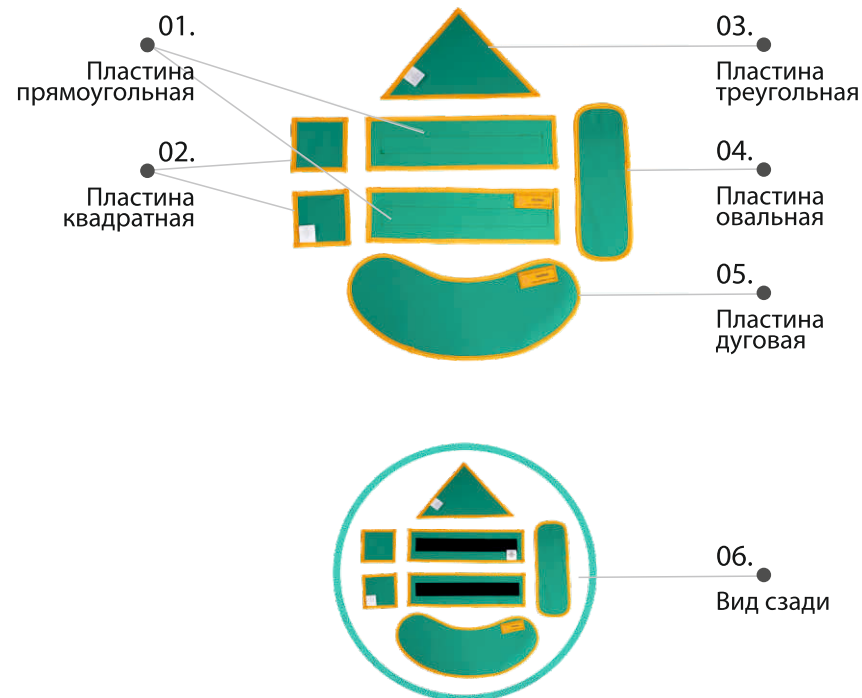

Наименование		Эквивалент, Pb	Размер (Длина х Ширина), см.	Вес изделия, кг.	
				ткань	винил
Пластина прямоугольная (2 шт.)	ПРЗП (2 шт.)	0.5	35x10	0,3	0,31
Пластина квадратная (2 шт.)	ПРЗК (2 шт.)	0.5	10x10	0,09	0,09
Пластина овальная (1 шт.)	ПРЗО (1 шт.)	0.5	30x10	0,2	0,21
Пластина треугольная (1 шт.)	ПРЗТ (1 шт.)	0.5	30x17,5	0,2	0,21
Пластина дуговая (1 шт.)	ПРЗД (1 шт.)	0.5	42x14,5	0,47	0,48

ДОКУМЕНТАЦИЯ

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 29 июля 2020 года № РЭН 2020/11504

На медицинское изделие
Индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения
по ТУ 14.12.30-001-2019-036-2019

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЮС"
(ООО "ПОЛЮС"), Россия,
620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68, оф. 17

Промышленность
Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЮС"
(ООО "ПОЛЮС"), Россия,
620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68, оф. 17

Место производства медицинского изделия
ООО "ПОЛЮС", Россия, 620109, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
Успенский пр-кт, д. 131

Номер регистрационного досье № Р.Д.3071186229 от 30.12.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 14.12.30.160

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах.

присвоен Росздравнадзору от 29 июля 2020 года № 6766
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Савилов
0049870

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 29 июля 2020 года № РЭН 2020/11504

Лист 1

На медицинское изделие
Индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения
по ТУ 14.12.30-001-2019-036-2019, ширинты ассистенции.

- фартук рентгенозащитный односторонний легкий ФРЭО-Л;
- фартук рентгенозащитный односторонний тяжелый ФРЭО-Т;
- фартук рентгенозащитный односторонний со стойкой легкой ФРЭСО-Л;
- фартук рентгенозащитный односторонний легкий ФРЭО-Л;
- фартук рентгенозащитный односторонний легкий ФРЭО-Т;
- фартук рентгенозащитный двусторонний легкий ФРЭД-Л;
- фартук рентгенозащитный двусторонний тяжелый ФРЭД-Т;
- фартук стоматологический рентгенозащитный односторонний легкий ФРЭС-Л;
- фартук стоматологический рентгенозащитный односторонний тяжелый ФРЭС-Т;
- фартук стоматологический рентгенозащитный односторонний для ортопантомографии ФРЭСор;
- халат рентгенозащитный легкий ХРЭ-Л;
- халат рентгенозащитный тяжелый ХРЭ-Т;
- жилет рентгенозащитный легкий ЖРЭ-Л;
- жилет рентгенозащитный тяжелый ЖРЭ-Т;
- юбка рентгенозащитная легкая ЮРЭ-Л;
- юбка рентгенозащитная тяжелая ЮРЭ-Т;
- юбка рентгенозащитная легкая ЮРЭ-Л;
- перчатки рентгенозащитные легкие ПРЭ-Л;
- перчатки рентгенозащитные тяжелые ПРЭ-Т;
- перчатки рентгенозащитные детские легкие ПРЭд-Л;
- перчатки рентгенозащитные детские тяжелые ПРЭд-Т;
- воротник рентгенозащитный легкий ВРЭ-Л;
- воротник рентгенозащитный легкий ВРЭ-Т;
- воротник рентгенозащитный легкий ВРЭд-Л;
- воротник рентгенозащитный легкий ВРЭд-Т;
- воротник рентгенозащитный для младенцев ВРЭм;
- шапочка рентгенозащитная легкая ШРЭ-Л;
- шапочка рентгенозащитная тяжелая ШРЭ-Т;
- рукавицы рентгенозащитные РРЭ;
- накладка (пальцы) рентгенозащитная ПРЭ;
- накладка (пальцы) рентгенозащитная детская ПРЭд;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Савилов
0071433

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 29 июля 2020 года № РЭН 2020/11504

Лист 2

- пленка рентгенозащитная прямоугольная ПРП;
- пленка рентгенозащитная овальная ПРЭО;
- пленка рентгенозащитная квадратная ПРК;
- пленка рентгенозащитная треугольная ПРТ;
- пленка рентгенозащитная дуговая ПРД.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Савилов
0071433

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»**
№ 0000154
по РОСС RU.11532.04HEX70 в качестве регистратора систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Регистрационный номер СДС НИИ.И.У.ОС09.00106
Срок действия с 05.10.2020 по 04.10.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № СДС НИИ.И.У.ОС09.00106, Общество с ограниченной ответственностью «МНИПУС-П», 141009, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, дом 10, помещение 3. ИНН: 5029255794 ОГРН: 1205000045161 e-mail: info@niie.ru

ПРОДУКЦИЯ Медицинские изделия. Индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения. Торговая марка: Общество с ограниченной ответственностью «Полюс» (ООО «Полюс»). Согласно приложению №1 к настоящему сертификату. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 14.12.30-001-2019-036-2019

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Полюс» (ООО «Полюс») Место нахождения: Россия, 620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68, оф. 17

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Полюс» (ООО «Полюс») Место производства: Россия, 620109, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский пр-кт, д. 131 ОГРН: 113665080432, ИНН: 6658211603, телефон: +7(343) 546-38-58, e-mail: info@poli.ru

НА ОСНОВАНИИ заключения комиссии экспертов № 13/26-20-788/2 от 10 июля 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Система сертификации: по ГОСТ Р 51603-2009. Оценка соответствия. Система сертификации продукции в Российской Федерации.

Руководитель органа А.В. Терещенко
Эксперт А.А. Савиловский

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»**
№ 0000155
по РОСС RU.11532.04HEX70 в качестве регистратора систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К сертификату соответствия СДС НИИ.И.У.ОС09.00106
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
Срок действия с 05.10.2020 по 04.10.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ СДС НИИ.И.У.ОС09.00106, Общество с ограниченной ответственностью «МНИПУС-П», 141009, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, дом 10, помещение 3. e-mail: info@niie.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
14.12.30.160	- фартук рентгенозащитный односторонний легкий ФРЭО-Л; - фартук рентгенозащитный односторонний тяжелый ФРЭО-Т; - фартук рентгенозащитный односторонний со стойкой легкой ФРЭСО-Л; - фартук рентгенозащитный односторонний легкий ФРЭО-Л; - фартук рентгенозащитный односторонний легкий ФРЭО-Т; - фартук рентгенозащитный двусторонний легкий ФРЭД-Л; - фартук рентгенозащитный двусторонний тяжелый ФРЭД-Т; - фартук стоматологический рентгенозащитный односторонний легкий ФРЭС-Л; - фартук стоматологический рентгенозащитный односторонний тяжелый ФРЭС-Т; - фартук стоматологический рентгенозащитный односторонний для ортопантомографии ФРЭСор;

Руководитель органа А.В. Терещенко
Эксперт А.А. Савиловский

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»**
№ 0000156
по РОСС RU.11532.04HEX70 в качестве регистратора систем добровольной сертификации

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
14.12.30.160	- халат рентгенозащитный легкий ХРЭ-Л; - халат рентгенозащитный тяжелый ХРЭ-Т; - жилет рентгенозащитный легкий ЖРЭ-Л; - жилет рентгенозащитный тяжелый ЖРЭ-Т; - юбка рентгенозащитная легкая ЮРЭ-Л; - юбка рентгенозащитная тяжелая ЮРЭ-Т; - юбка рентгенозащитная легкая ЮРЭ-Л; - перчатки рентгенозащитные легкие ПРЭ-Л; - перчатки рентгенозащитные тяжелые ПРЭ-Т; - перчатки рентгенозащитные детские легкие ПРЭд-Л; - перчатки рентгенозащитные детские тяжелые ПРЭд-Т; - воротник рентгенозащитный легкий ВРЭ-Л; - воротник рентгенозащитный легкий ВРЭ-Т; - воротник рентгенозащитный легкий ВРЭд-Л; - воротник рентгенозащитный легкий ВРЭд-Т; - воротник рентгенозащитный для младенцев ВРЭм; - шапочка рентгенозащитная легкая ШРЭ-Л; - шапочка рентгенозащитная тяжелая ШРЭ-Т; - рукавицы рентгенозащитные РРЭ; - накладка (пальцы) рентгенозащитная ПРЭ; - накладка (пальцы) рентгенозащитная детская ПРЭд; - пленка рентгенозащитная прямоугольная ПРП; - пленка рентгенозащитная овальная ПРЭО; - пленка рентгенозащитная квадратная ПРК; - пленка рентгенозащитная треугольная ПРТ; - пленка рентгенозащитная дуговая ПРД.

Руководитель органа А.В. Терещенко
Эксперт А.А. Савиловский



ПОЛЮС



торгово-производственная фирма

ПОЛЮС

Наша компания ценит каждого клиента!
Спасибо, что доверяете нам!

Адрес

Россия г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43/А

Телефон

+7 (343) 346-38-58

E-mail

info@pole96.ru