



MEDEX
каталог продукции



О КОМПАНИИ

3 000+

Лечебно-профилактических учреждений доверяют качеству нашей продукции

13



лет на рынке

65+



средств

10 000

квадратных метров
производственно-складских
мощностей



50+



высококвалифицированных
специалистов в штате компании

117



представителей дилерской сети
в регионах РФ и странах ЕврАэс

01

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Авестил Ультра	5
Люир	6
Люир Окси +	
Люир Пероксин	7
Люир Пероксин 24	
Люир Триамин	8
Люир Вайт Актив	
Телесфор Форте	9
Телесфор Люкс	
Телесфор 55	10
Люир Табс	
Люир Вайт	11

02

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Люир Гипохлор	12
Хлорамин Б	13
Люир Хлор	
Люир Хлор Люкс	14
Ксион Хлор	

05

САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ, ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Люир Экспресс	23
Ксион Энзим С	
Альтсепт Лайт	24
Альтсепт Час	
Ксион Элит	25
Ксион Элит Саше	
Альтсепт Экспресс	26
Ксион НУК С	

03

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ОПЕРАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Люир Экпресс	15
Альтсепт Лайт	16
Альтсепт ЧАС	
Альтсепт	17
Альтсепт ОП	
Альтсепт Экпресс	18
Ксион Про	
Смайлсепт	19

06

СРЕДСТВА ДЛЯ ЭНДОСКОПИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ XION

Люир Экпресс MAXI SIZE	27
Ксион ОПА	28
Ксион 2% Га	
Ксион Окси	29
Ксион Про	
Ксион Энзим	30

04

ЖИДКИЕ МЫЛА С АНТИБАКТЕАРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ, АНТИ- СЕПТИКИ, КРЕМ

Люир Мед	20
Мыло Люир	
Альтсепт М	21
Альтсепт-М Терра	
Телесфор М	22

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



Авестил Ультра



Состав:

ЧАС 22%, глутаровый альдегид (ГА) 10% и функциональные добавки.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*), вирусов, ВБИ, грибковых инфекций (в т.ч. плесневых грибов *Aspergillus niger*), а также спороцидной активностью.

pH 4,5±1,5



Назначение:

- проведение генеральных уборок;
- дезинфекция поверхностей и оборудования ЛПУ, в том числе по спороцидному режиму;
- дезинфекция ИМН (в т.ч. хирургические и стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам), гибких и жестких эндоскопов;
- обеззараживание биологических выделений, медицинских отходов.

Люир



Состав:

Смесь ЧАС суммарно 4,5 – 6,5%, комплекс органических кислот 0,9 – 1,1%, а также функциональные добавки и вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), вирусов, грибов рода Кандида, Дерматофитов, (в т.ч. плесневых грибов *Aspergillus niger*), возбудителей особо опасных инфекций), а также овоцидным действием.

pH 7,2±1,0



Назначение:

- проведение генеральных уборок;
- дезинфекция поверхностей и оборудования в ЛПУ;
- дезинфекция ИМН (в том числе одноразового применения) при ООИ и контаминированных плесневыми грибами;
- ПСО изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами;
- предварительная и окончательная очистка эндоскопов и инструментов к ним;
- обеззараживание биологических выделений, дезинфекция медицинских отходов класса Б и В.

Люир Окси +



Состав:

Стабилизированная перекись водорода 12-14%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид 3%, ЧАС 3%, функциональные добавки, а также вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*), вирусов, ВБИ, анаэробных и особо опасных инфекций, легионеллеза, грибковых инфекций рода Кандида, Дерматофитов (в т.ч. плесневых грибов *Aspergillus niger*), а также спороцидной активностью и овоцидным действием.

pH 5,5±1,5



Назначение:

- проведение генеральных уборок в ЛПУ любого профиля;
- дезинфекция поверхностей и оборудования (в т.ч. датчиков УЗИ), включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, в том числе при ООИ;
- дезинфекция воздуха помещений и систем кондиционирования;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся и замковые), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним;
- ПСО изделий медицинского назначения (в т.ч. инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов;
- обеззараживание биологических выделений, медицинских отходов класса Б и В.

Люир Пероксин



Состав:

Стабилизированная перекись водорода 18-21%, ЧАС 6-8%, функциональные моющие добавки, вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая *M.terrae*), вирусов, ВБИ, анаэробных и особо опасных инфекций, легионеллеза, грибковых инфекций (в т.ч. плесневых грибов *Aspergillus niger*), а также спороцидной активностью и овоцидным действием.

pH 6,5±1,0



Назначение:

- проведение генеральных уборок в ЛПУ любого профиля;
- санитарно-технического оборудования;
- дезинфекция помещений при поражении плесневыми грибами;
- дезинфекция поверхностей и оборудования (в т.ч. датчиков УЗИ), включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, в том числе при ООИ;
- дезинфекция воздуха помещений и систем кондиционирования;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся и замковые), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним;
- ПСО изделий медицинского назначения (в т.ч. инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов;
- обеззараживание биологических выделений, медицинских отходов класса Б и В;
- ДВУ жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;
- для стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты и материалы из пластмасс, резин на основе натурального и синтетического каучука (термолабильные материалы), металлов, стекла; жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним).

Люир Пероксин 24



Состав:

Стабилизированная перекись водорода, комплекс оксикислот (гликолевая, молочная, гидроакриловая), функциональные добавки, вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая *M.terrae*), вирусов, ВБИ, анаэробных и особо опасных инфекций, легионеллеза, грибковых инфекций (в т.ч. плесневых грибов *Aspergillus niger*), а также спороцидной активностью и овоцидным действием.

pH: от 2,5 до 5,5



Назначение:

- проведение генеральных уборок в ЛПУ любого профиля;
- санитарно-технического оборудования;
- дезинфекция помещений при поражении плесневыми грибами;
- дезинфекция поверхностей и оборудования (в т.ч. датчиков УЗИ), включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, в том числе при ООИ;
- дезинфекция воздуха помещений и систем кондиционирования;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся и замковые), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним;
- ПСО изделий медицинского назначения (в т.ч. инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов;
- обеззараживание биологических выделений, медицинских отходов класса Б и В;
- ДВУ жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;
- для стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты и материалы из пластмасс, резин на основе натурального и синтетического каучука (термолабильные материалы), металлов, стекла; жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним).

Люир Триамин



Состав:

N,N-бис(3-аминопропил) додециламина 7% и функциональные добавки, в том числе неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.tergae*), вирусов, грибковых инфекций (в т.ч. дрожжеподобных грибов *C. Albicans*, плесневых грибов *Aspergillus niger*), а также спорцидной активностью.

pH 10,8±1,5



Назначение:

- проведение генеральных уборок;
- дезинфекция поверхностей и оборудования ЛПУ (включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных);
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, изделий медицинского назначения (в т.ч. хирургические и стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам), гибких и жестких эндоскопов;
- ПСО ИМН (в т.ч. инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов;
- обеззараживание биологических выделений, медицинских отходов.

Люир Вайт Актив



Состав:

Натрия перкарбонат, ТАЭД, энзимный комплекс, ПАВ.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.tergae*), вирусов, фунгицид (кандида, трихофитон плесени), анаэробные и особо опасные инфекции, ВБИ), а также спорцидной активностью и овоцидным действием.

pH 7,8±1,0



Назначение:

- проведение генеральных уборок;
- дезинфекция поверхностей и оборудования (в т.ч. датчиков УЗИ), включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, в том числе по спорцидному режиму;
- дезинфекция ИМН;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, ИМН (в т.ч. хирургические и стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам), гибких и жестких эндоскопов;
- к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов;
- для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
- для стерилизации изделий медицинского назначения.

Телесфор Форте



Состав:

Смесь ЧАС суммарно 7%, ПГМГ 1,7%, N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 0,8%, функциональные моющие добавки, вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая возбудителей ВБИ), туберкулеза (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*), грибковых инфекций вирусов, возбудителей особо опасных инфекций, а также спорцидной активностью и овоцидным действием.

pH 7,5±1,5



Назначение:

- проведение генеральных уборок в ЛПУ любого профиля;
- дезинфекция поверхностей и оборудования (в т.ч. датчиков УЗИ), включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, в том числе при ООИ;
- дезинфекция воздуха помещений и систем кондиционирования;
- дезинфекция поверхности скорлупы пищевых яиц;
- дезинфекция, в т.ч. ПСО ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся и замковые), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним;
- ПСО ИМН (в т.ч. инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов;
- обеззараживание биологических выделений, медицинских отходов класса Б и В.

Телесфор Люкс



Состав:

Смесь ЧАС суммарно 16%, ПГМГ 4% и N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 2%, а также функциональные моющие добавки, ферментный комплекс (липаза, амилаза, протеаза), вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*), вирусов, возбудителей особо опасных инфекций, анаэробных инфекций, легионеллеза, грибковых инфекций, а также спорцидной активностью и овоцидным действием.

pH 8,2±1,5



Назначение:

- проведение генеральных уборок в ЛПУ любого профиля;
- дезинфекция поверхностей и оборудования (в т.ч. датчиков УЗИ), включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, в том числе при ООИ;
- дезинфекция воздуха помещений и систем кондиционирования;
- дезинфекция, в т.ч. ПСО ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся и замковые), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним;
- ПСО ИМН (в т.ч. инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов;
- обеззараживание биологических выделений, медицинских отходов класса Б и В.

Телесфор 55



Состав:

Смесь ЧАС, ПГМГ, АМИН, 2-феноксиэтанол, ферментный комплекс, функциональные моющие добавки, вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), вирусов, возбудителей особо опасных инфекций, анаэробных инфекций, легионеллеза, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.



pH 7,9±2,0

Назначение:

- проведение генеральных уборок в ЛПУ любого профиля;
- дезинфекция поверхностей и оборудования (в т.ч. датчиков УЗИ), включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, в том числе при ООИ;
- дезинфекция воздуха помещений и систем кондиционирования;
- дезинфекция, в т.ч. ПСО ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся и замковые), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним;
- предварительная, предстерилизационная (окончательная) очистка, не совмещенная с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты (в т.ч. вращающиеся) и материала, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним ручным и механизированным способом;
- обеззараживание биологических выделений, медицинских отходов класса Б и В.

Люир Табс



Состав:

ПГМГ 0,25 – 0,3 гр. (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид).

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), вирусов, ВБИ, возбудителей особо опасных инфекций, овоцидным действием.

Широкий спектр применения.

pH 7,0±1,5%



Назначение:

- дезинфекция поверхностей и оборудования (в т.ч. датчиков УЗИ), включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных;
- дезинфекция медицинских отходов класса Б и В, в т.ч. отходов инфекционных (включая отделения ООИ и анаэробных инфекций);
- ПСО ИМН (в т.ч. инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО (в т.ч. хирургические и стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам), гибких и жестких эндоскопов.

Люир Вайт



Состав:

Натрия перкарбонат, тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), энзимный комплекс, а также сода кальцинированная.

Массовая доля активного кислорода 3-6%. pH водного раствора средства с массовой долей 1% - 9-11 pH

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.tetrae*), вирусов, ВБИ, грибковых инфекций (в т.ч. плесневых грибов *Aspergillus niger*), а также спороцидной активностью.



Назначение:

- дезинфекция и стирка белья;
- проведение генеральных уборок;
- дезинфекция поверхностей и оборудования (в т.ч. датчиков УЗИ), включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, в том числе по спороцидному режиму;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, ИМН (в т.ч. хирургические и стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам), гибких и жестких эндоскопов;
- ПСО ИМН (в т.ч. инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов.

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



Люир Гипохлор



Состав:

Гипохлорит натрия, а также функциональные и стабилизирующие добавки.

Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий ((включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), возбудителей ВБИ, ООИ (в том числе споры сибирской язвы), легионеллеза, анаэробных инфекций, вирусов, грибковых инфекций, а также спорцидной активностью и овоцидным действием.

pH 11,0±1,5



Назначение:

- обеззараживание поверхностей, в т.ч. в очагах ООИ и при подозрении на контаминацию возбудителями ООИ;
- проведение генеральных и текущих уборок;
- обеззараживание биологических выделений;
- дезинфекция медицинских отходов;
- дезинфекция в т.ч. совмещенная с ПСО, ИМН из стекла, резины, пластмасс.

Хлорамин Б



Состав:

Натриевая соль хлорамида бензолсульфокислоты, а также функциональные компоненты.

Содержание активного хлора - не менее 25%.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae), вирусов, возбудителей особо опасных инфекций, а также спороцидной активностью, грибковых инфекций.

pH 6,5±1,5.



Назначение:

- обеззараживание поверхностей, в т.ч. в очагах ООИ и при подозрении на контаминацию возбудителями ООИ;
- проведение генеральных и текущих уборок;
- обеззараживание биологических выделений;
- дезинфекция медицинских отходов;
- дезинфекция при поражении плесенью.

Люир Хлор



Состав:

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, а также функциональные компоненты. Содержание активного хлора - не менее 55,5%.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae, M.tuberculosis), вирусов, возбудителей особо опасных инфекций, грибковых инфекций, а также спороцидной активностью.

Таблетка 3,2 грамма, гранулы.

pH: 7,0±1,5



Назначение:

- обеззараживание поверхностей, в т.ч. в очагах ООИ и при подозрении на контаминацию возбудителями ООИ;
- проведение генеральных уборок;
- обеззараживание биологических выделений;
- дезинфекция медицинских отходов;
- дезинфекция на предприятиях пищевой промышленности;
- дезинфекция ИМН.

Люир Хлор Люкс



Состав:

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, а также ПАВ и функциональные компоненты. Содержание активного хлора- $0,75 \pm 0,2$ (1,7г), $1,5 \pm 0,3$ (3,2г)

Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая возбудителей ВБИ), туберкулеза (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*), вирусов, возбудителей особо опасных и анаэробных инфекций, легионеллеза, грибковых инфекций, а также спороцидной активностью и овоцидным действием.

pH: $7,0 \pm 1,5$



Таблетки 1,7 грамма и 3,2 грамма.

Назначение:

- дезинфекция поверхностей и оборудования в ЛПУ (включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных);
- дезинфекция в т.ч. совмещенная с ПСО, ИМН из стекла, резины, пластмасс;
- проведение генеральных и текущих уборок;
- обеззараживание воды в том числе в плавательных бассейнах, колодцах;
- обеззараживание биологических выделений;
- дезинфекция на предприятиях пищевой промышленности.

Ксион Хлор



Состав:

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, ПАВ, функциональные и стабилизирующие рабочий раствор компоненты

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), вирусов, возбудителей особо опасных инфекций, грибковых инфекций, а также спороцидной активностью.

Таблетки 1,7 грамма и 3,2 грамма.

pH: $7,0 \pm 1,5$



Назначение:

- дезинфекция поверхностей и оборудования в ЛПУ (включая отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных);
- дезинфекция в т.ч. совмещенная с ПСО, ИМН из стекла, резины, пластмасс;
- проведение генеральных и текущих уборок;
- обеззараживание воды в том числе в плавательных бассейнах, колодцах;
- обеззараживание биологических выделений, медицинских отходов класса Б и В;
- ДВУ жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;
- для стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические и

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ОПЕРАЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОЛЕЙ



Люир Экспресс



Состав:

ЧАС 0,95%, а также другие функциональные добавки и вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae) вирусов и возбудителей грибковых инфекций.

pH 7,0±1,5



Назначение:

- гигиеническая обработка рук;
- обеззараживание медицинских перчаток, надетых на руки медицинского персонала;
- первичное снятие загрязнений с неповрежденных кожных покровов;
- санитарная обработка кожных покровов;
- очистка и дезинфекция поверхностей, в т.ч. датчиков УЗИ, оборудования, куветов, стоматологических наконечников и т.д.

Альтсепт Лайт



Состав:

Изопропиловый спирт 25-27%, синергетические функциональные компоненты (ЧАС, амин, гуанидин).

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*), вирусов, возбудителей грибковых инфекций.

7,0±1,5 ед.



Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
- обеззараживание перчаток (латексные хирургические и смотровые, виниловые, химически стойкие, полиэтиленовые), надетых на руки;
- дезинфекция небольших по площади поверхностей, оборудования, приборов, включая датчики к аппаратам УЗИ;
- дезинфекция ИМН.

Альтсепт ЧАС



Состав:

Изопропиловый спирт (2-пропанол) 45%, пропиловый спирт (1-пропанол) 15%, ЧАС 0,25%, функциональные компоненты.

Обладает антимикробной активностью отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*), возбудителей особо опасных инфекций, вирусов, ВБИ, легионеллеза, анаэробных инфекций, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

Обладает пролонгированным действием в течение 5 часов.



pH 7,0±1,5

Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
- обработка кожи операционных полей и локтевых сгибов доноров;
- обработка инъекционных полей;
- обработка рук хирургов;
- обеззараживание перчаток (латексные хирургические и смотровые, виниловые, химически стойкие, полиэтиленовые), надетых на руки;
- очистка и дезинфекция поверхностей, в т.ч. датчиков УЗИ, оборудования, куветов, стоматологических наконечников и т.д.

Альтсепт



Состав:

Изопропиловый спирт 50%, пропиловый спирт 20%, хлоргексидин биглюконат 0,1%, гликолевая кислота 0,1%, а также функциональные добавки и вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), возбудителей особо опасных инфекций, вирусов, ВБИ, легионеллеза, анаэробных инфекций, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

Обладает пролонгированным действием в течение 5 часов.



pH 7,0±1,0

Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала, в т.ч. рук хирургов;
- обеззараживание перчаток (латексные хирургические и смотровые, виниловые, химически стойкие, полиэтиленовые), надетых на руки;
- дезинфекция небольших по площади поверхностей, оборудования, приборов, включая датчики к аппаратам УЗИ.

Альтсепт ОП




Состав:

Изопропиловый спирт 50%, пропиловый спирт 20%, хлоргексидин биглюконат 0,1%, гликолевая кислота 0,1%, а также функциональные добавки и вода.

Обладает антимикробной активностью отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*), возбудителей особо опасных инфекций, вирусов, ВБИ, легионеллеза, анаэробных инфекций, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

Обладает пролонгированным действием в течение 5 часов.

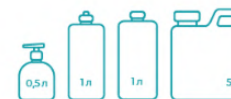

pH 7,0±1,0

Назначение:

- обработка кожи операционных и инъекционных полей, локтевых сгибов доноров

Альтсепт Экспресс



Состав:

Изопропиловый спирт 30%, пропиловый спирт 40%, хлоргексидин биглюконат 0,1% N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 0,1%, молочная кислота 0,1%, а также функциональные добавки и вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), возбудителей особо опасных инфекций, вирусов, ВБИ, легионеллеза, анаэробных инфекций, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

Обладает пролонгированным действием в течение 5 часов.



pH 7,0±1,5

Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала, в т.ч. рук хирургов;
- обеззараживание перчаток (латексные хирургические и смотровые, виниловые, химически стойкие, полиэтиленовые), надетых на руки;
- дезинфекция небольших по площади поверхностей, оборудования, приборов, включая датчики к аппаратам УЗИ;
- дезинфекция ИМН.

Ксион Про



Состав:

Изопропиловый спирт 70%, синергетические функциональные добавки, в том числе феноксиэтанол 0,1%.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), возбудителей особо опасных инфекций, вирусов, ВБИ, легионеллеза, анаэробных инфекций, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

Обладает пролонгированным действием в течение 5 часов.

pH 7,0±1,5



Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала, в т.ч. рук хирургов;
- обеззараживание перчаток (латексные хирургические и смотровые, виниловые, химически стойкие, полиэтиленовые), надетых на руки;
- дезинфекция небольших по площади поверхностей, оборудования, приборов, включая датчики к аппаратам УЗИ.

Смайлсепт



Состав:

изопропиловый спирт 30%, пропиловый спирт 45%, бензиловый спирт 0,1%, ЧАС 0,1%, ПГМГ 0,1%, а также функциональные добавки и вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), возбудителей особо опасных инфекций, вирусов, ВБИ, легионеллеза, анаэробных инфекций, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

Обладает пролонгированным действием в течение 5 часов.



pH 7,0±1,5

Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала, в т.ч. рук хирургов;
- обеззараживание перчаток (латексные хирургические и смотровые, виниловые, химически стойкие, полиэтиленовые), надетых на руки;
- дезинфекция небольших по площади поверхностей, оборудования, приборов, включая датчики к аппаратам УЗИ.

ЖИДКИЕ МЫЛА С АНТИБАКТЕРИ- АЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ, АНТИСЕПТИКИ, КРЕМ

04

Люир Мед



Состав:

Вода деионизированная, глицерин, масло Ши, Д-пантенол, этилпарабен, карбопол, аллантоин, гидроксид натрия, отдушка.



Назначение:

— для повседневного ухода за кожей рук после контакта с чистящими, моющими и дезинфицирующими средствами. Крем обладает противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом, способствует снятию раздражения и покраснения кожи, оказывает успокаивающее действие, увлажняет и питает кожу рук.

Мыло Люир



Состав:

5-хлоро-2-(2,4-дихлорофенокси) фенол (триклозан), а также комплекс ПАВ, специальные добавки, смягчающие и увлажняющие кожу рук, оказывающие противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (кроме микобактерий туберкулеза) и фунгицидной активностью.

pH 7,0



Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ);
- санитарная обработка кожных покровов медицинского персонала и пациентов в ЛПУ, в т.ч. обработка ступней ног;
- для населения в быту.

Альтсепт М



Состав:

Тетранил У 2%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий и фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов.

pH 7,0



Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ);
- санитарная обработка кожных покровов медицинского персонала и пациентов в ЛПУ, в т.ч. обработка ступней ног;
- для населения в быту в целях профилактики грибковых заболеваний.

Альтсепт-М Терра



Состав:

N,N-бис(3-аминопропил) додециламин в диапазоне 0,1-0,3%, феноксиэтанол 0,05-0,1%, а также ПАВ, функциональные добавки и вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), вирусов, фунгицидной активностью, а также овоцидным действием.

pH 7,0±1,5



Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала (в том числе оперирующего);
- санитарной обработки кожных покровов персонала и пациентов в ЛПУ
- для применения населением в быту;
- для мойки и дезинфекции посуды.

Телесфор М



Состав:

ЧАС, N,N-бис(3-аминопропил) додециламин, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, а также ПАВ и функциональные добавки.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), вирусов, ВБИ, анаэробных инфекций, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

pH 7,0±1,5



Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ);
- санитарная обработка кожных покровов медицинского персонала и пациентов в ЛПУ, в т.ч. обработка ступней ног;
- для населения в быту в целях профилактики грибковых заболеваний.

САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ



Люир Экспресс



Состав:

ЧАС 0,95%, функциональные добавки.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*), вирусов, ВБИ, грибковых инфекций.

pH 7,0±1,5



Назначение:

- гигиеническая обработка рук;
- обеззараживание медицинских перчаток, надетых на руки медицинского персонала;
- первичное снятие загрязнений с неповрежденных кожных покровов;
- санитарная обработка кожных покровов;
- очистка и дезинфекция поверхностей, в т.ч. датчиков УЗИ, оборудования, кушеток, стоматологических наконечников и т.д.

Ксион Энзим С



Состав:

Комплекс ферментов, N,N-бис(3-аминопропил) додециламин, функциональные добавки.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*), вирусов, внутрибольничных инфекций, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

pH 7,0±1,5



Назначение:

- для предварительной (окончательной) очистки ИМН, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним, шлангов гибких эндоскопов и колоноскопов;
- для предварительной (окончательной) очистки датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.);
- для дезинфекции изделий медицинского назначения, диагностического оборудования;
- для дезинфекции различных твердых непористых поверхностей и небольших предметов, в т.ч. загрязненных кровью, биологическими субстратами.

Альтсепт Лайт



Состав:

Изопропиловый спирт 25-27%, синергетические функциональные компоненты (ЧАС, амин, гуанидин).

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae), вирусов, возбудителей грибковых инфекций.

pH 7,0±1,5



Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
- обеззараживание перчаток (латексные хирургические и смотровые, виниловые, химически стойкие, полиэтиленовые), надетых на руки;
- дезинфекция небольших по площади поверхностей, оборудования, приборов, включая датчики к аппаратам УЗИ;
- дезинфекция ИМН.

Альтсепт ЧАС



Состав:

Изопропиловый спирт (2-пропанол) 45%, пропиловый спирт (1-пропанол) 15%, ЧАС 0,25%, функциональные компоненты.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae), возбудителей особо опасных инфекций, вирусов, ВБИ, легионеллеза, анаэробных инфекций, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

Обладает пролонгированным действием в течение 5 часов.



Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
- обработка кожи операционных полей и локтевых сгибов доноров;
- обработка инъекционных полей;
- обработка рук хирургов;
- обеззараживание перчаток (латексные хирургические и смотровые, виниловые, химически стойкие, полиэтиленовые), надетых на руки;
- очистка и дезинфекция поверхностей, в т.ч. датчиков УЗИ, оборудования, кузезов, стоматологических наконечников и т.д.

Ксион Элит



Состав:

Этиловый спирт 70%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,08%, хлоргексидин биглюконат – 0,12%, феноксиэтанол 0,08%, а также вспомогательные компоненты и вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), вирусов, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

pH 7,0±1,5



Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
- обеззараживание перчаток (латексные хирургические и смотровые, виниловые, химически стойкие, полиэтиленовые), надетых на руки;
- хирургическая обработка рук;
- инъекционное поле;
- дезинфекция небольших по площади поверхностей, оборудования, приборов, включая датчики к аппаратам УЗИ;
- дезинфекция ИМН.

Ксион Элит



Состав:

Этиловый спирт 70%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,08%, хлоргексидин биглюконат – 0,12%, феноксиэтанол 0,08%, а также вспомогательные компоненты и вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), вирусов, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

pH 7,0±1,5



Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
- обеззараживание перчаток (латексные хирургические и смотровые, виниловые, химически стойкие, полиэтиленовые), надетых на руки;
- хирургическая обработка рук;
- инъекционное поле;
- дезинфекция небольших по площади поверхностей, оборудования, приборов, включая датчики к аппаратам УЗИ;
- дезинфекция ИМН.

Альтсепт Экспресс



Состав:

Пропиточный состав салфетки содержит изопропиловый (2-пропанол) 50%, пропиловый спирт (1-пропанол) 20%, хлоргексидин биглюконат 0,5%, а также вода.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae), вирусов, ВБИ, грибковых инфекций.



Назначение:

- гигиеническая обработка рук;
- обеззараживание медицинских перчаток, надетых на руки медицинского персонала;
- первичное снятие загрязнений с неповрежденных кожных покровов; – санитарная обработка кожных покровов;
- очистка и дезинфекция поверхностей, в т.ч. датчиков УЗИ, оборудования, куветов т.д.

Ксион Нук С



Состав:

Надуксусная кислота 0,2%, функциональные и стабилизирующие добавки

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae) вирусов, грибов рода Кандида, Дерматофитов, (в т.ч. плесневых грибов), возбудителей особо опасных инфекций, в том числе спорообразующих (возбудителей сибирской язвы), а также овоцидным действием.



Назначение:

Назначение:

- Дезинфекция ИМН
- дезинфекция небольших по площади поверхностей, оборудования, приборов, включая УЗИ-датчики
- ДВУ УЗИ-датчиков

СРЕДСТВА ДЛЯ ЭНДОСКОПИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ XION

Общество с ограниченной ответственностью
«СОНОСКЕЙП МЕДИЦИНА РУС»
Республика Татарстан г. Казань
420108 ул. Мазита Гафури, д. 50, эт. 1, пом. 38

SonoScape

Исх. № 11032024/14
от 11.03.2024г.

Всем заинтересованным лицам и организациям

Информационное письмо

ООО «Соноскейл Медицина Рус» официальный дистрибьютор SonoScape Medical Corporation (Китай) в России.

Компания SonoScape Medical Corporation, основанная в 2002 году, на сегодняшний день является одним из самых крупных мировых производителей медицинского оборудования.

Настоящим письмом ООО «Соноскейл Медицина Рус» свидетельствует Вам свое искреннее уважение, выражает надежду на продолжение взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества и сообщает следующее.

На основании произведенных испытаний на совместимость дезинфицирующих средств с материалами, используемыми при производстве изделий медицинского назначения, жестких и гибких эндоскопов (в т.ч. инструментов к ним) производства SonoScape Medical Corporation (Китай), компанией рекомендуются к использованию следующие средства:

Торговая марка	Производитель	Активное вещество	Совместимость с эндоскопами SonoScape
XION Enzyme	ООО «НПК Медэкс»	Смесь ПАВ, ферментный комплекс	совместим
XION 2% GA	ООО «НПК Медэкс»	Глутаровый альдегид	совместим
XION OPA	ООО «НПК Медэкс»	Ортофталевый альдегид	совместим

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим санитарным законодательством Российской Федерации при выборе средств очистки, дезинфекции (в том числе ДВУ) для ручного способа обработки, а также средств и методов стерилизации должны учитываться рекомендации изготовителей эндоскопов и инструментов, касающиеся воздействия конкретного средства (стерилизующего агента) на материалы этих медицинских изделий. (пп. 3688-3689 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»).

Генеральный директор _____ Гао Чэн



Люир Экспресс MAXI SIZE



Состав:

Пропиточный состав салфетки содержит четвертичное аммониевое соединение – 0,95%, а также другие функциональные добавки и воду.

pH 5,5-8,0

Размер 1 салфетки:
220x240 мм.



Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на Mycobacterium terrae), вирусов, ВБИ, грибковых инфекций.

Назначение:

- гигиеническая обработка рук;
- обеззараживание медицинских перчаток, надетых на руки медицинского персонала;
- первичное снятие загрязнений с неповрежденных кожных покровов;
- санитарная обработка кожных покровов;
- очистка и дезинфекция поверхностей, в т.ч. датчиков УЗИ, оборудования, кувезов, стоматологических наконечников и т.д.

Ксион ОПА



Состав:

Ортофталевый альдегид 0,55-0,65%, вспомогательные компоненты.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибковых инфекций, ВБИ, возбудителей особо опасных инфекций, в том числе спорообразующих (возбудителей сибирской язвы), овоцидным действием (в отношении цист и ооцист, яиц, онкосфер и личинок гельминтов).

pH 6,5-8,0



Назначение:

- ДВУ жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;
- Стерилизация изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты и материалы из пластмасс, резин на основе натурального и синтетического каучука (термолабильные материалы), металлов, стекла; жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним).

Ксион 2% ГА



Состав:

Улутаровый альдегид 2,2-2,7%, вспомогательные компоненты.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибковых инфекций, ВБИ, возбудителей особо опасных инфекций, в том числе спорообразующих (возбудителей сибирской язвы), овоцидным действием (в отношении цист и ооцист, яиц, онкосфер и личинок гельминтов).

pH 1,5-2,5



Назначение:

- ДВУ жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;
- Стерилизация изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты и материалы из пластмасс, резин на основе натурального и синтетического каучука (термолабильные материалы), металлов, стекла; жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним).

Ксион Окси



Состав:

Стабилизированная перекись водорода 6,0-8,0%, надуксусная кислота 0,2-0,3%, функциональные добавки.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибковых инфекций, ВБИ, возбудителей особо опасных инфекций, в том числе спорообразующих (возбудителей сибирской язвы), овоцидным действием (в отношении цист и ооцист, яиц, онкосфер и личинок гельминтов).



pH 1,5-2,5

Назначение:

- ДВУ жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;
- Стерилизация изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты и материалы из пластмасс, резин на основе натурального и синтетического каучука (термолабильные материалы), металлов, стекла; жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним).

Ксион Про



Состав:

Изопропиловый спирт 70%.

Обладает антимикробной активностью в отношении гр- и гр+ (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae, M.tuberculosis), возбудителей особо опасных инфекций, вирусов, ВБИ, легионеллеза, анаэробных инфекций, грибковых инфекций, а также овоцидным действием.

pH 7,0±1,5



Назначение:

- удаление влаги из полостей медицинских изделий, в том числе эндоскопов и полых инструментов к ним.

Ксион Энзим



Состав:

Ферментный комплекс (протеаза, амилаза, липаза, целлюлаза), ПАВ, стабилизаторы, функциональные добавки.

pH 6,0-8,0



Назначение:

– Предварительная, предстерилизационная и окончательная очистка, не совмещённая с дезинфекцией, ИМН, включая жёсткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, а также хирургические и стоматологические инструменты.



NPK MEDEX

✉ info@npkmedex.ru

☎ 8(495)646-77-90